



SAUGTECHNIK MASTER & SENATOR

- ✓ zuverlässig
- ✓ saugstark
- ✓ sehr leise



SWISS QUALITY 

 ARDO

VAKUUMPUMPEN

ZUVERLÄSSIG, SAUGSTARK UND LEISE



Die beiden Vakuumpumpen Master und Senator bestehen mit kompromissloser Saugleistung, schnellem Vakuumaufbau und vielen weiteren Vorteilen:

- ✓ Grosses Vakuummeter erleichtert Einstellen und Ablesen des Vakuums.
- ✓ Hochwertige Antriebseinheit mit Glaszylinder und Graphitkolben garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei äusserst leisem Betrieb.
- ✓ Hydrophober Bakterienfilter für optimale Sicherheit.
- ✓ Fussvakuumregler und Fussschalter erhältlich für freihändige Bedienung.
- ✓ Reinigungsfreundliche Oberfläche für einfache Hygiene.

Die anwenderfreundlichen Pumpen im modernen Design bieten somit optimale Unterstützung bei verschiedensten Eingriffen und sind Ihre flüsterleisen Helfer im Hintergrund.

MASTER

Saugleistung 50 l/min,
Vakuum bis 95 kPa, 713 mmHg



SENATOR

Saugleistung 30 l/min,
Vakuum bis 95 kPa, 713 mmHg



inkl. Geräteschiene

Master & Senator
auch mit Fusschalter
erhältlich

für freihändiges Ein-/Aussschalten



Mit dem Master wählen Sie die Hochleistungsvariante der Ardo Vakuumpumpen mit kompromissloser Saugleistung von 50 l/min.

Bewährte Anwendungsgebiete:

- ✓ Chirurgie
- ✓ Liposuktion
- ✓ Zahn- und Kieferchirurgie
- ✓ Veterinärmedizin

Der Senator ist die richtige Wahl bei allen Anwendungen mit einer Saugleistung bis zu 30 l/min.

Bewährte Anwendungsgebiete:

- ✓ Endoskopie
- ✓ Gynäkologie & Geburtshilfe
- ✓ Hals-Nasen-Ohren (HNO)
- ✓ Sekretabsaugung allgemein

Ardo Pumpen
sind sehr leise
und äusserst
wartungsarm.



UNSERE VORTEILE


WARUM EINE ARDO VAKUUMPUMPE WÄHLEN?



3guard
system

Optimale Sicherheit

Das "3guard" Schutzsystem sorgt in allen Situationen für einen optimalen Schutz und maximale Sicherheit. Der hydrophobe Bakterienfilter hat eine Doppelfunktion. Er schützt das Aggregat bei einem allfälligen Überlauf vor Flüssigkeit und Schaum. Zugleich ist der Bakterienfilter ein höchst effizienter Schutz gegen Bakterien. Der im Flaschendeckel integrierter Schwimmer verhindert wirksam das Überlaufen eines vollen Behälters.

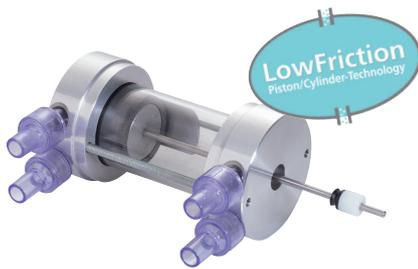

LowFriction
Piston/Cylinder-Technology

Hochwertiges Kolbensystem

Die Pyrex-Glaszylinder mit den dazugehörigen Graphitkolben bilden das Kernstück des einzigartigen "LowFriction" Zylinder/Kolben Systems. Das selbstschmierende, wartungsfreie System verspricht einen nahezu lautlosen Betrieb für optimale Konzentration während der Anwendung. Hochwertige Bauteile und Schweizer Präzision in der Fertigung sorgen in ihrer Kombination für eine exzellente Funktion. Der schnelle Vakuumaufbau und die hohen Saugleistungen stehen für optimale Leistungsentfaltung bei jedem Einsatz.



Mehrweg und Einweg Zubehör

Wählen Sie gemäss Ihrem Bedarf aus unserem Mehrweg- und Einweg-Zubehör. **Mehrweg Behälter:** erhältlich in den Grössen 1, 2 und 5 Liter, aus hochwertigem Polysulfon, autoklavierbar und mit einer deutlich lesbaren Graduierung. Der Deckel passt auf alle Behältergrössen und der Halter für verschiedene Geräteschienen ist im Deckel bereits integriert.

Einweg Behälter: Sekretbehälter und Kanister erhältlich in den Grössen 1 und 2 Liter mit antimikrobieller Technologie BactiClear®.


Der Sekretbehälter hat einen integrierten hydrophoben Bakterienfilter zum Schutz vor Kontamination und Überlauf. Die passenden Mehrweg Kanister verfügen über eine deutlich lesbare Graduierung sowie einen Universalhalter für alle gängigen Geräteträger.



Individuelle Applikationssets

Stellen Sie Ihre individuelle Ausstattung selber zusammen oder wählen Sie aus verschiedenen vorkonfigurierten Sets. Mit den zahlreichen Optionen von Ardo sind Sie jederzeit perfekt für Ihren Einsatz gerüstet.

- ✓ Langlebiges und robustes Rollgestell
- ✓ Fussvakuumregler – auf Wunsch mit passendem Halter zum Rollgestell
- ✓ Fussschalter für freihändiges Ein-/Ausschalten
- ✓ Umschaltventil für die Parallelschaltung von zwei Auffangbehältern
- ✓ Instrumententablar zur Geräteschiene
- ✓ Verschiedene Auffangbehälter



Master & Senator

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF exkl. MWST
30.00.33	Master 50 l/min	3'235.00
30.00.38	Master 50 l/min mit Fusschalter	3'392.00
31.00.33	Senator 30 l/min	2'341.00
31.00.39	Senator 30 l/min mit Fusschalter	2'497.00
50.00.170	Rollgestell für Master und Senator	499.00
50.00.05	Hydrophober Bakterienfilter für Master und Senator 10 Stück	15.60
50.00.131	Applikationsset Chirurgie 5 Liter Mehrwegbehälter, Flaschendeckel, Patientenschlauch und Instrumentenablage	428.00
50.00.132	Applikationsset Liposuktion 2 Liter Mehrwegbehälter, Flaschendeckel, Patientenschlauch und Fussvakuumregler	810.00
50.00.133	Applikationsset Sekret 2 Liter Mehrwegbehälter, Flaschendeckel, Patientenschlauch	233.00
50.00.135	Applikationsset Uterine Aspirator 1 Liter Mehrwegbehälter, Flaschendeckel, Küretten Set 6/8/10/12 mm, Patientenschlauch und Instrumentenablage	1'155.00
50.00.136	Applikationsset Vakuum-Extraktor 1 Liter Mehrwegbehälter, Flaschendeckel, Silikon Saugglocke 60 mm, Fussvakuumregler	1'295.00

Mehrweg Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF exkl. MWST
50.00.167	1 Liter Sekretflasche, Polysulfon	82.00
50.00.168	2 Liter Sekretflasche, Polysulfon	93.00
50.00.169	5 Liter Sekretflasche, Polysulfon	155.00
50.00.08	Flaschendeckel mit Griff und Überlaufsicherung, für Patientenschlauch Ø 7 mm	120.00
50.00.02	Patientenschlauch Silikon (transparent) Ø 7/13 mm, mit Winkelsteckkupplung, Länge 1.70 m	21.00
50.00.01	Verbindungsschlauch Ø 7/13 mm mit 2 Winkelsteckkupplungen, Länge 0.5 m	25.00

Einweg Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF exkl. MWST
50.00.103	1 Liter Mehrweg-Kanister BactiClear® mit Graduierung	13.50
50.00.100	1 Liter Einweg-Sekretbehälter BactiClear® mit hydrophobem Bakterienfilter Verpackungseinheit: 25 Stück	3.40
50.00.104	2 Liter Mehrweg-Kanister BactiClear® mit Graduierung	13.50
50.00.117	2 Liter Einweg-Sekretbehälter BactiClear® mit hydrophobem Bakterienfilter Verpackungseinheit: 30 Stück	3.40
50.00.233	Verbindungsschlauch Ø 7/13 mm, Steckkupplung schwarz (antimikrobiell) und Kupplungsstück transparent, Länge 0.5 m	5.70
50.00.235	Steckkupplung schwarz (antimikrobiell)	1.00
50.00.236	Patientenschlauch Silikon (transparent) Ø 7/13 mm, Länge 1.70 m	21.00
50.00.106	Schienenhalter für Kanister mit Schienenklemme 25x10 mm	21.00



Kontaktieren Sie uns für eine Probestellung oder weitere Informationen:

Ardo medical AG
 Gewerbestrasse 19
 6314 Unterägeri
 Schweiz

T +41 41 754 70 70
 F +41 41 754 70 71
 info@ardo.ch
 www.ardo.ch